




L'impianto BTLock è l'evoluzione dell'impianto dentale tradizionale: un sistema di connessione tra fixture e abutment **brevettato, unico ed innovativo**, che garantisce **semplicità di utilizzo ed estetica**, per soddisfare con un'unica soluzione le esigenze del clinico e le necessità del paziente. **BTLock è il Made in Italy dell'implantologia orale: un marchio di qualità stampato su ogni sorriso.**



Dal 1996 BTLock progetta e realizza esclusivamente in Italia sistemi implantari con la consapevolezza di offrire un prodotto originale ed efficace. Una storia fatta di ricerca continua, di studio e di specializzazione, di prove ed esperimenti vissuti con entusiasmo quotidiano, con l'unico obiettivo di portare sul mercato il miglior prodotto possibile.

- TEST ESEGUITI
- DISEGNI FATTI
- COLPI DI GENIO
- NOTTI INSONNI

**CREATIVITÀ
ESPERIENZA
TECNICA**

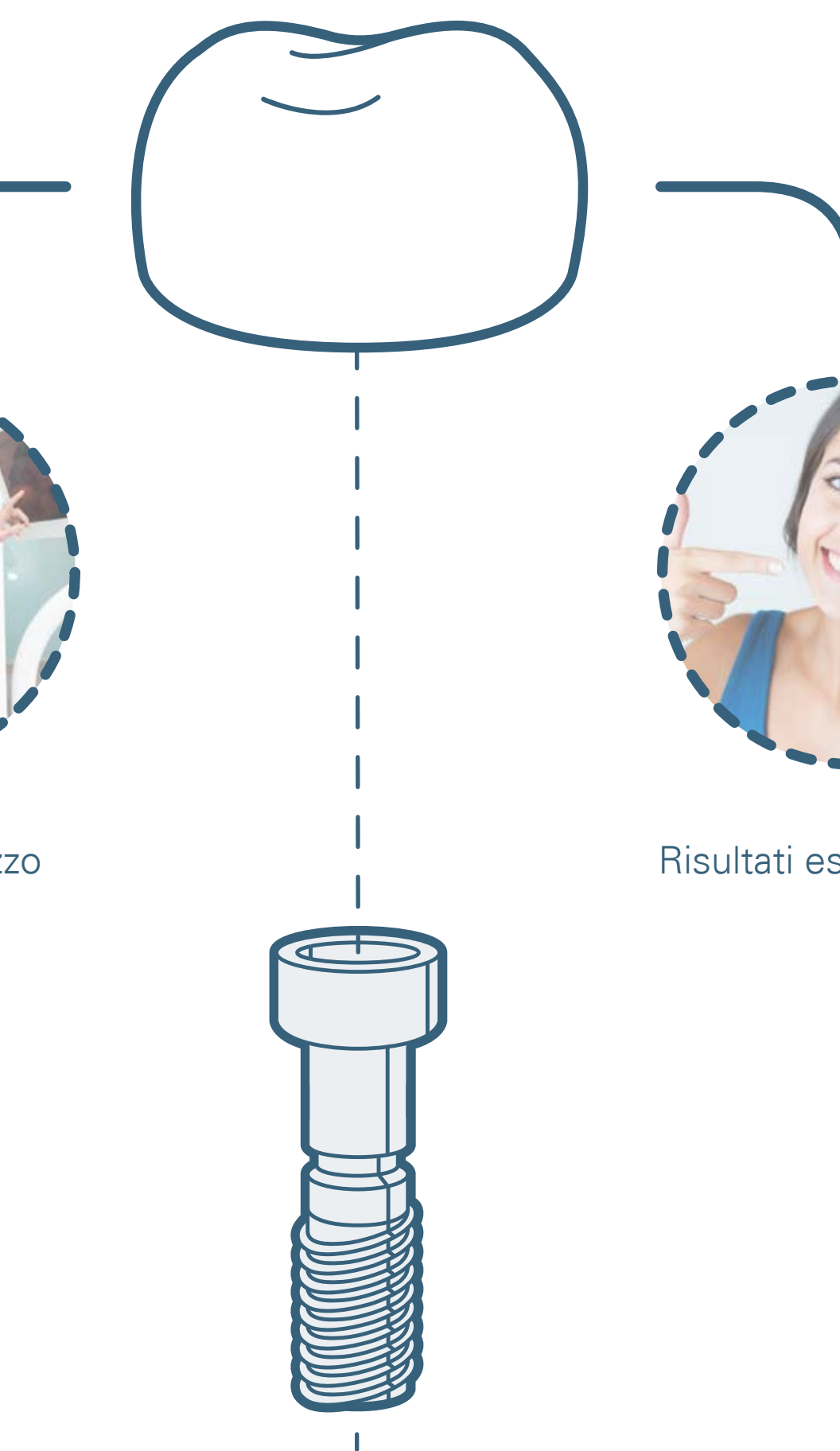


CONNESSIONE




Semplicità di utilizzo



Risultati estetici ottimali

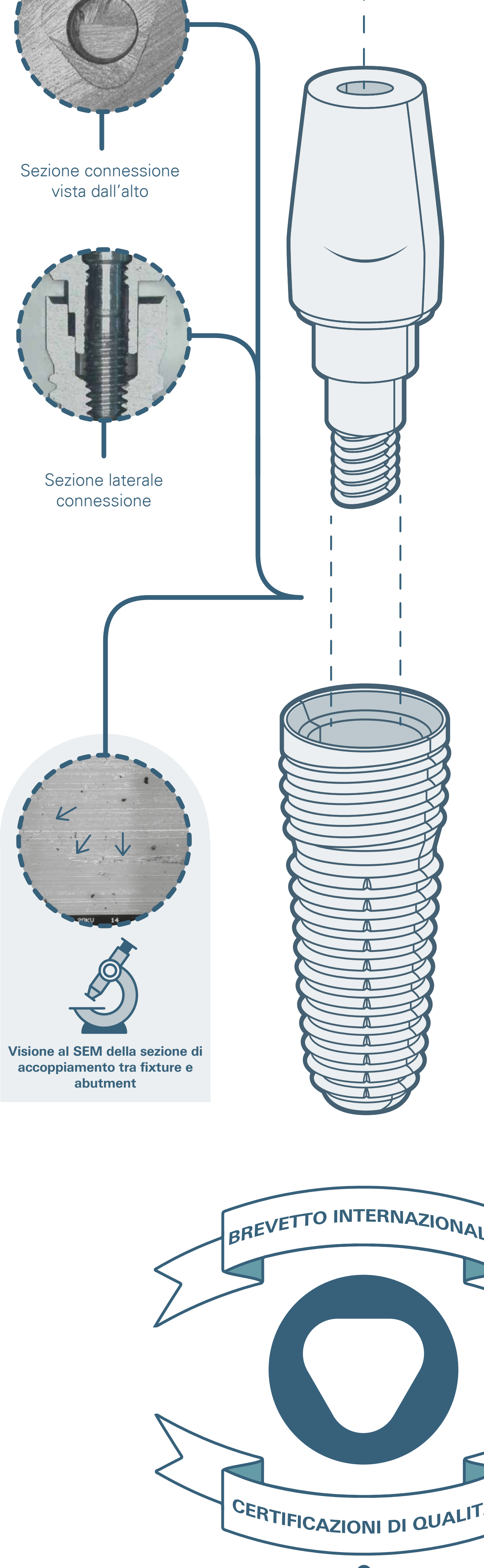

Sezione connessione vista dall'alto

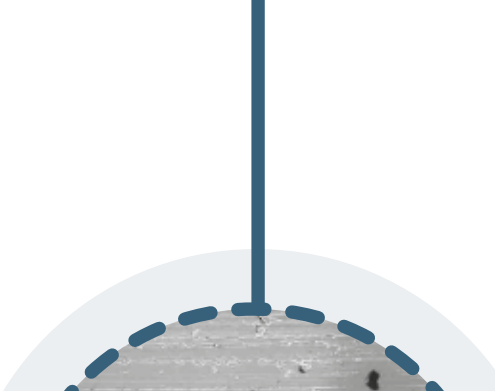



Sezione laterale connessione



Visione al SEM della sezione di accoppiamento tra fixture e abutment


- Caratteristiche**
- Geometria triangolare interna
 - Asimmetria su tre differenti livelli
 - Doppio antirotazionale

- Punti di forza**
- Il design, con tre angoli arrotondati, che forniscono precisione e solidità
 - La profondità dell'incastro tra fixture e abutment di 2.96mm, che garantisce un'elevata stabilità meccanica riducendo al minimo i micromovimenti
 - Il bisello conico sulla fixture e controsgomatura sull'abutment, che crea un accoppiamento perfetto tra le parti, bloccando l'infiltrazione di liquidi e batteri e preservando il solco perimplantare dalle infiammazioni
 - La lavorazione fresata al tornio, scelta per evitare le sollecitazioni lesive ottenute dalla usuale lavorazione a stampo

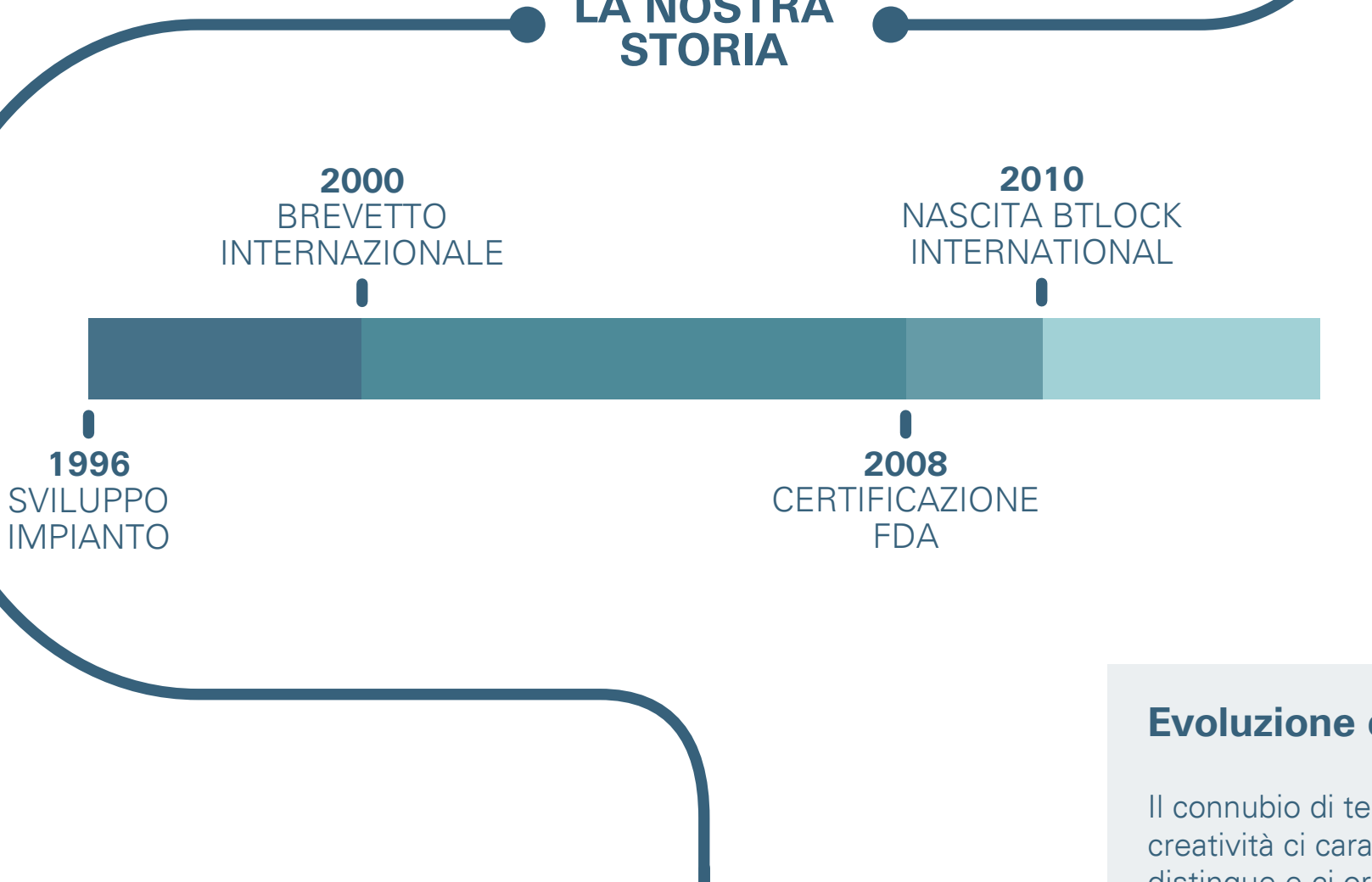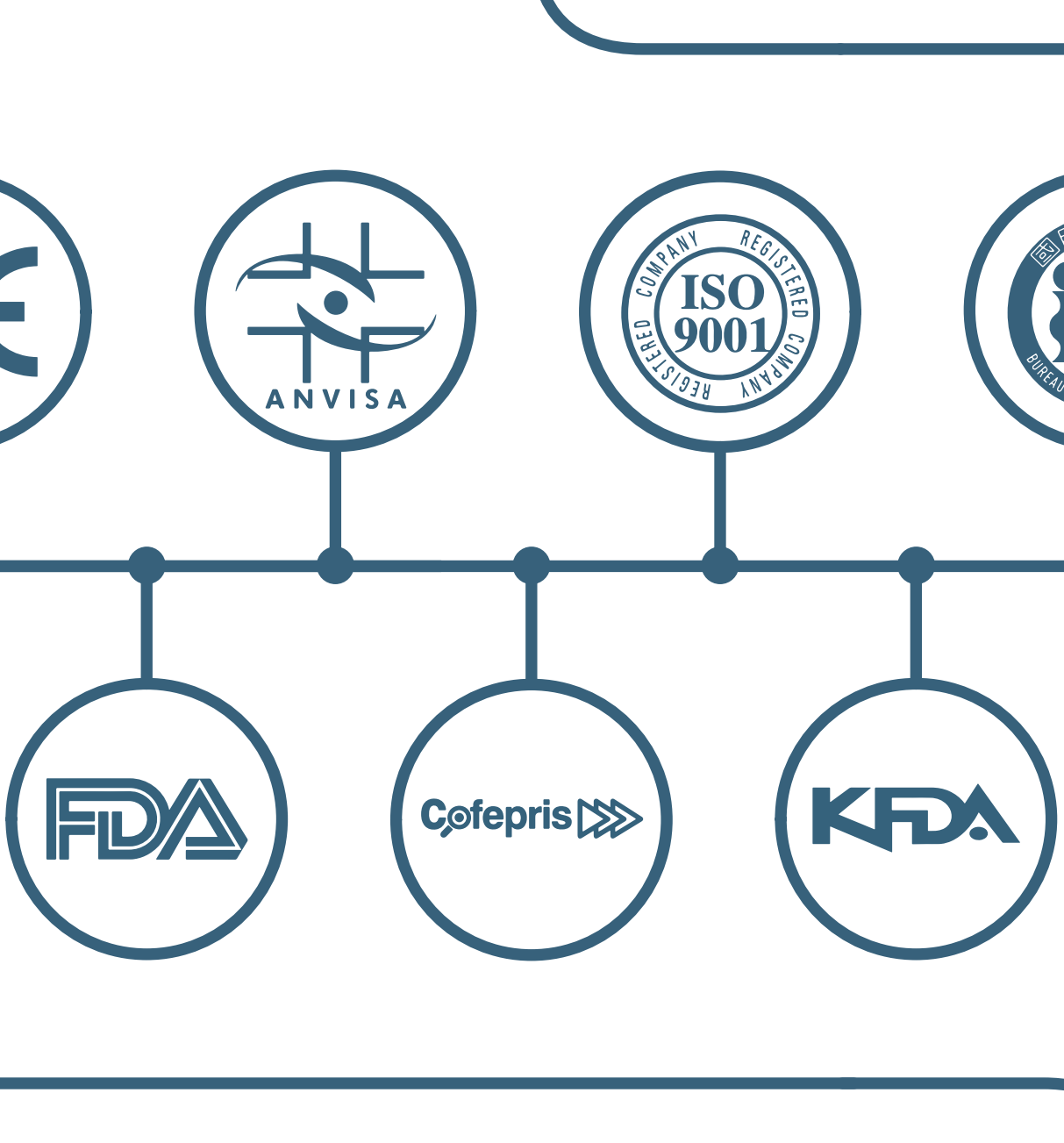


LA NOSTRA STORIA

Evoluzione continua
Il connubio di tecnica e creatività ci caratterizza, ci distingue e ci orienta ogni giorno verso il domani.

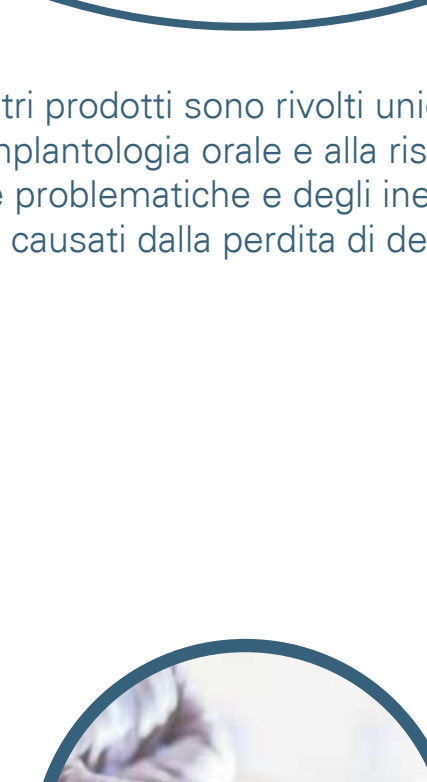

SPECIALIZZAZIONE
I nostri prodotti sono rivolti unicamente all'implantologia orale e alla risoluzione delle problematiche e degli inestetismi causati dalla perdita di denti.

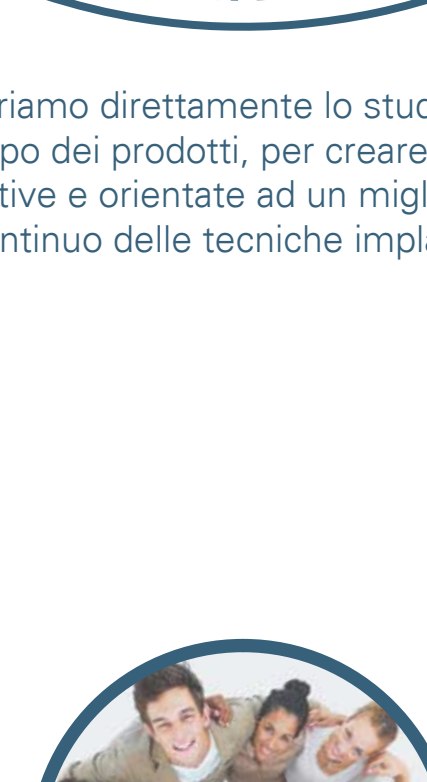

INNOVAZIONE
Curiamo direttamente lo studio e lo sviluppo dei prodotti, per creare soluzioni innovative e orientate ad un miglioramento continuo delle tecniche implantari.



FLESSIBILITÀ
Lavoriamo in maniera flessibile per andare incontro ai nostri clienti con soluzioni e servizi sempre più adatti e attenti alle loro specifiche esigenze.



PEOPLE FOCUSED
Le persone per noi sono importanti: per questo abbiamo creato un legame più profondo tra ricercatori, implantologi, odontotecnici e pazienti.

BTLOCK NEL MONDO



Distribuzione internazionale
La gamma di prodotti completa e originale ha reso BTLock International un importante punto di riferimento per l'implantologia orale a livello mondiale. L'ampia rete distributiva è costituita principalmente da paesi dislocati in Europa, Asia, Africa, America Latina e Stati Uniti.

SEDE AMMINISTRATIVA
Montecchio Maggiore (VI)

SEDE PRODUTTIVA
Vibo Valentia (VV)

SISTEMA IMPLANTARE

<p>CV1 Colletto periodontale machine-cut 1.6 mm, filettatura one, indicato per post estrattivi e carico immediato.</p>	<p>CV3 Platform switching, scanature longitudinali autofilettanti/automaschianti, indicato per qualsiasi caso.</p>	<p>Active Colletto periodontale 0.3mm, microsolchi cristalli, scanature longitudinali autofilettanti/automaschianti, indicato per qualsiasi caso.</p>
<p>Mini Stabilizzazione a lungo termine overdenture di protesi mobili, la cappetta protesica è inclusa nella confezione di vendita degli impianti.</p>	<p>Mini Single Per le aree strette dell'arcata dentaria, studiato per la sostituzione dei denti laterali, degli incisivi inferiori e per le agenesie dentali.</p>	<p>Short Offre una soluzione in caso di limitata altezza d'osso, massimizza le possibilità di posizionamento dell'impianto, riduce procedure complesse.</p>

COMPONENTI PROTESICHE

La ricca gamma di componenti protesici e accessori rispondono ad un vasto panorama di problematiche.

<p>MONCONI</p>	<p>PRESA D'IMPRONTA</p>
<p>VITI DI GUARIGIONE</p>	<p>COMPONENTI PER MINI E MINI SINGLE</p>


MENZIONE SPECIALE



ESPANSORI E OSTEOTOMI
Per la creazione e la compattazione di siti implantari senza perdita di osso, espandono progressivamente le creste sottili, compattano la parete del sito aumentando la stabilità primaria.



CAD CAM
Scan abutment per la ricostruzione protesica attraverso software.



KIT PER LA CHIRURGIA GUIDATA
Permette di utilizzare una tecnica combinata di fresa calibrata ed espansori: tempi e invasività dell'intervento ridotti, riabilitazione protesica provvisoria guidata.

BTLock

"Tecnologia. Ricerca. Produzione italiana. BTLock è il Made in Italy dell'implantologia orale: un marchio di qualità stampato su ogni sorriso."



Rimani in **contatto** con noi.

www.btlock.com
mail: info@btlock.com
tel: **0039 0444 492609**
fax: **0039 0444 497647**

© 2016 BTLock International Srl